


上海茁彩生物科技有限公司
Shanghai zcibio technology Co., Ltd.

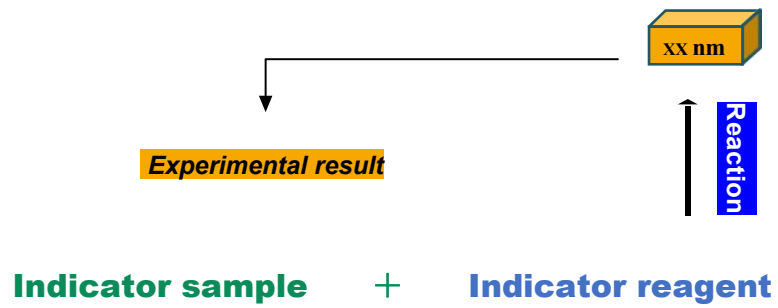

生化检测原理示意图

货号：ZC-S0793

规格：50管/24样

可溶性酸性转化酶 (Soluble acid invertase, S-AI) 试剂盒说明书

可见分光光度法

注意：正式测定之前选择2-3个预期差异大的样本做预测定。

测定意义：

蔗糖转化酶 (Invertase, Ivr) 催化蔗糖不可逆地分解为果糖和葡萄糖，是高等植物蔗糖代谢关键酶之一。根据最适 pH, Ivr 分为酸性转化酶 (AI) 和中性转化酶 (NI) 两种类型。

AI 的最适 pH 为 3~5。AI 分为可溶性 AI (S-AI) 和细胞壁不溶性 AI (B-AI) 两种类型。S-AI 主要存在于细胞液泡或自由空间中，最适 pH 为 4.5~5.0 (酸性)，通过降解液泡中蔗糖，调节液泡中蔗糖的利用和果实内糖类的积累。

测定原理：

S-AI 催化蔗糖降解产生还原糖，进一步与 3,5-二硝基水杨酸反应，生成棕红色氨基化合物，在 510nm 有特征光吸收，在一定范围内 510nm 光吸收增加速率与 S-AI 活性成正比。

自备用品：

可见分光光度计、台式离心机、水浴锅、移液器、1mL 玻璃比色皿、研钵、冰和蒸馏水。

试剂组成和配制：

种类	试剂规格	储存条件	使用方法及注意事项
提取液	液体 50mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 50mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	粉剂×1 瓶	4℃保存	临用前加入25mL试剂一充分溶解备用；用不完的试剂 4℃保存；
试剂三	液体 30mL×1 瓶	4℃保存	

粗酶液提取：

按照组织质量 (g) : 提取液体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液)，进行冰浴匀浆。12000g 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

测定步骤和加样表：

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
样本	200	200
试剂一		800
试剂二	800	
混匀，37℃准确水浴 30min 后，95℃水浴 10min (盖紧，以防水分散失)，流水冷却后充分混匀 (以保证浓度不变)		
试剂三	500	500

混匀，95℃水浴 10min (盖紧，以防止水分散失)，流水冷却后充分混匀，510nm 处，蒸馏水调零，记录各管吸光值 A，如果吸光值大于 2，可以用蒸馏水稀释后测定 (计算公式中乘以相应稀释倍数)， $\Delta A = A_{测定} - A_{对照}$ 。

S-AI 活性计算：

标准条件下测定的回归方程为 $y = 0.0016x - 0.001$ ； x 为标准品浓度 ($\mu\text{g/mL}$)， y 为吸光值。

(1) 按蛋白浓度计算：

单位的定义：37°C每mg蛋白每分钟产生1 μg 还原糖定义为一个酶活性单位。

$$\begin{aligned} \text{S-AI 活性 } (\mu\text{g}/\text{min}/\text{mg prot}) &= [(\Delta A + 0.001) \div 0.0016 \times V1] \div (V1 \times \text{Cpr}) \div T \\ &= 20.8 \times (\Delta A + 0.001) \div \text{Cpr} \end{aligned}$$

(2) 按鲜重计算：

单位的定义：37°C每g组织每分钟产生1 μg 还原糖定义为一个酶活性单位。

$$\begin{aligned} \text{S-AI 活性 } (\mu\text{g}/\text{min}/\text{g 鲜重}) &= [(\Delta A + 0.001) \div 0.0016 \times V1] \div (W \times V1 \div V2) \div T \\ &= 20.8 \times (\Delta A + 0.001) \div W \end{aligned}$$

V1：加入反应体系中样本体积，0.2mL；V2：加入提取液体积，1mL；T：反应时间，30min；

Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；W：样本鲜重，g。